

SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie sich die Gehhilfe von Fachpersonal funktionsgerecht und ergonomisch korrekt einstellen und in die weitere Benutzung einweisen
- Beachten Sie das maximal zugelassene Körpergewicht des Produkts
- Befestigen Sie keine Gegenstände (Taschen, Beutel) an Ihrer Gehilfe
- Bei sichtbaren Schäden wenden Sie sich bitte an Fachpersonal.
- Das selbständige Richten der Gehhilfe ist untersagt und liegt außerhalb unserer Haftung.
- Nehmen Sie keine mechanischen Veränderungen an der Gehhilfe vor, da wir aus Haftungsgründen dann keine Sicherheit mehr gewährleisten können!
- Bei Modellen mit Druckknopf muss der Druckknopf ordnungsgemäß aus dem Loch herausragen.
- Gummikapsel bei zu starker Abnutzung austauschen.
- Vermeiden Sie das Begehen von Schnee- und Eisflächen mit Gummikapseln, nutzen Sie hierzu spezielle Schnee- und Eiskappen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Verschraubung der Gehhilfe.
- Gehhilfen dürfen nicht als Schaltheife für Lichtschalter und Fahrstuhlknöpfe sowie zum Hebeln und Versetzen von schweren Gegenständen zweckentfremdet werden!
- Für einen sicheren Halt der Gehilfe ist der Untergrund entscheidend. Nasse oder eisige Stellen, lose Böden (Kies, Sand, Fußmatte, Teppich) und Unebenheiten wie Löcher im Boden können zu einem unerwarteten Einsinken oder Ausrutschen führen.
- Seien Sie bei schlechten Lichtverhältnissen sehr vorsichtig, da Unebenheiten im Boden nur schwer erkennbar sind.



GEBRAUCHS- ANLEITUNG FÜR IHREN GEHSTOCK

Im Bühl 5 – 73432 Aalen
TEL +49 (0)7361/81 28 909
FAX +49 (0)7361/81 28 910
MAIL info@stock-fachmann.de
WEB www.stock-fachmann.de

VERWENDUNG

Unsere Stöcke dienen Menschen zum Ausgleich bei verminderter Belastbar- und Leistungsfähigkeit, sowie als Koordinationshilfe. Die Nutzung der Stöcke kann sowohl im Haus, als auch außerhalb erfolgen.



PRODUKTINFORMATIONEN

- Hohe Belastbarkeit
- Echtholzstock aus Buchenholz
- Kratz- und witterungsbeständig

Alle Produkte sind gemäß den Richtlinien des Medizinproduktgesetzes hergestellt.

RICHTIGE LÄNGE FINDEN

Die richtige Länge bestimmen Sie am besten bei aufrechter Haltung und locker am Körper hängenden Armen. Der Stockgriff sollte auf dem Boden stehen und das Ende des Stockes nach oben zeigen. In Höhe des Handgelenks markieren Sie den Stock und haben hierdurch die ideale Länge für Ihren Stock (Zum Bestimmen der Länge können Länge können Sie auch einen Besenstil oder ähnliches verwenden)

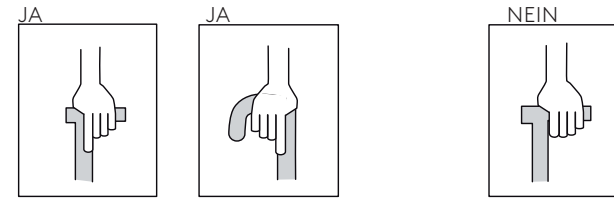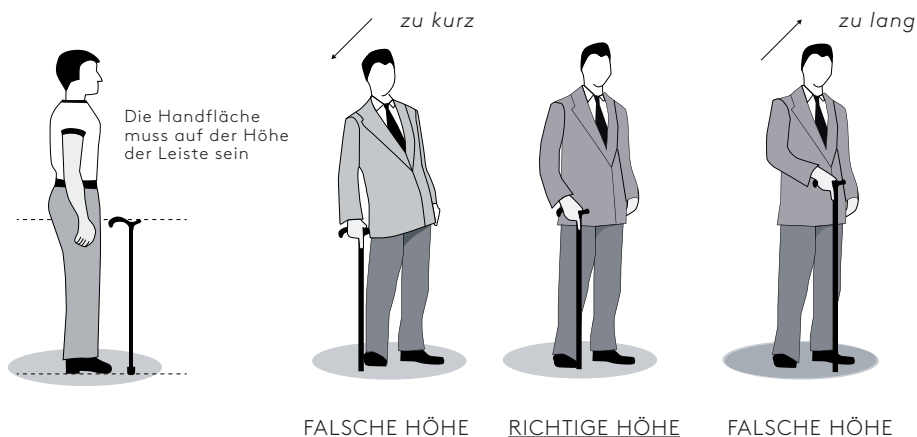

BEISPIELTABELLE

(EMPFOHLENE MASSANGABEN)

1	148	155	160	162	164	168	170	172	174	176	178	180
2	77	80,5	83	84	86	87	88	89	90	91	92	93

Zu 1: Personengröße in cm

Zu 2: Stocklänge in cm

BENUTZUNG

- Die korrekte Handhabung des Stockes benötigt etwas Übung. Es ist empfehlenswert sich von Fachpersonal einweisen zu lassen.
- Nutzen Sie den Stock immer auf der Seite, die sich gegenüber dem zu schonenden Bein befindet.
- Halten Sie ihren Stock nahe und gerade am Körper und nicht schräg nach außen, da dies zu einem ungewollten wegrutschen führen kann.
- Setzen Sie Ihren Stock nie zu weit vom Körper entfernt auf.
- Tragen Sie bequemes Schuhwerk mit flachen Absätzen. Bei Treppen halten Sie sich unbedingt mit der freien Hand am Geländer fest.

AUSTAUSCH DER GUMMIKAPSEL

Gebrauchte Gummikapsel abziehen und neue aufschieben. Bitte beachten Sie die Kapselgröße und einen festen Sitz.